

wellead

ENDOUROLOGÍA

ClearPetra®

Sistema Para Litotricia de Flujo Continuo

※ Ciertos códigos de referencia / especificaciones pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a los representantes de ventas regionales antes de realizar un pedido.



El sistema ClearPetra para litotricia de flujo continuo de Well Lead Medical está diseñado para el tratamiento eficaz y eficiente de los cálculos urinarios

mediante **Aspiración por Presión Negativa** a través de una oblicua puerto lateral de la vaina ClearPetra. Tiene un alto índice de eliminación de cálculos, reduce la presión intraluminal en el tracto urinario, previene la formación de cálculos y reduce el riesgo de infección, retro pulsión, mejora el campo visual, evita la necesidad de cestas de cálculos, fórceps o cualquier dispositivo antirretro pulsión y ahorra tiempo de intervención.

INDICACIONES

ClearPetra Vaina de acceso ureteral

Uso para cálculos renales, cálculos ureterales, esteatosis ureteral

Juego de vainas de acceso para nefrostomía ClearPetra

Uso para cálculos renales y ureterales superiores

Vaina de cistoscopia ClearPetra

Uso para cálculos vesicales

Botella Stone Collection

Uso para recoger piedras

PRESTACIONES

1 **Reduce la presión intraluminal**

La irrigación y succión continuas crean un vórtice. Reduce la presión operativa (intraluminal) y disminuye el riesgo de cirugía.

2 **Se acabó la retropulsión de piedras**

Evita eficazmente la migración retrógrada de cálculos con la aspiración a presión negativa y, al mismo tiempo, elimina los fragmentos del cálculo.

3 **Mejora del campo visual**

Bajo la irrigación y succión continuas, la hemorragia y la tormenta de polvo de la pulverización de piedras ya no oscurecen el campo visual.

4 **Despeje de piedras mejorado**

Los fragmentos de cálculos se agregarán en el extremo distal de la vaina ClearPetra en lugar de dispersarse y se eliminan a través del puerto lateral oblicuo de la vaina ClearPetra mediante la succión continua.

5 **No se necesitan accesorios**

Las cestas para cálculos, las pinzas y los dispositivos antirretroceso ya no son necesarios. Con la aspiración a presión negativa, los fragmentos de cálculos se evacúan espontáneamente.

● ClearPetra Vaina de acceso ureteral

ID x Longitud	Ref. No.	ID x Longitud	Ref. No.
9,5Fr x 26cm	90119526	9,5Fr x 46cm	90119546
10Fr x 26cm	90111026	10Fr x 46cm	90111046
11Fr x 26cm	90111126	11Fr x 46cm	90111146
12Fr x 26cm	90111226	12Fr x 46cm	90111246
13Fr x 26cm	90111326	13Fr x 46cm	90111346
14Fr x 26cm	90111426	14Fr x 46cm	90111446
9,5Fr x 36cm	90119536	9,5Fr x 50cm	90119550
10Fr x 36cm	90111036	10Fr x 50cm	90111050
11Fr x 36cm	90111136	11Fr x 50cm	90111150
12Fr x 36cm	90111236	12Fr x 50cm	90111250
13Fr x 36cm	90111336	13Fr x 50cm	90111350
14Fr x 36cm	90111436	14Fr x 50cm	90111450
9,5Fr x 40cm	90119540	9,5Fr x 55cm	90119555
10Fr x 40cm	90111040	10Fr x 55cm	90111055
11Fr x 40cm	90111140	11Fr x 55cm	90111155
12Fr x 40cm	90111240	12Fr x 55cm	90111255
13Fr x 40cm	90111340	13Fr x 55cm	90111355
14Fr x 40cm	90111440	14Fr x 55cm	90111455

1ud/caja, 10ud/ctn

*



● **ClearPetra Vaina de acceso de nefrostomía**

Super-Mini PCNL		Mini PCNL	
ID/OD x Longitud	Ref. No.	ID/OD x Longitud	Ref. No.
10/12Fr x 13cm	90121013	16/18Fr x 13cm	90121613
10/12Fr x 15cm	90121015	16/18Fr x 15cm	90121615
10/12Fr x 17cm	90121017	16/18Fr x 17cm	90121617
12/14Fr x 13cm	90121213	18/20Fr x 13cm	90121813
12/14Fr x 15cm	90121215	18/20Fr x 15cm	90121815
12/14Fr x 17cm	90121217	18/20Fr x 17cm	90121817
14/16Fr x 13cm	90121413	20/22Fr x 13cm	90122013
14/16Fr x 15cm	90121415	20/22Fr x 15cm	90122015
14/16Fr x 17cm	90121417	20/22Fr x 17cm	90122017

* 1ud/caja, 10ud/ctn

PCNL estándar	
ID/OD x Longitud	Ref. No.
22/24Fr x 13cm	90122213
22/24Fr x 15cm	90122215
22/24Fr x 17cm	90122217
24/26Fr x 13cm	90122413
24/26Fr x 15cm	90122415
24/26Fr x 17cm	90122417
26/28Fr x 13cm	90122613
26/28Fr x 15cm	90122615
26/28Fr x 17cm	90122617

● Juego de vainas de acceso para nefrostomía ClearPetra

■ Componentes

- ClearPetra Vaina de acceso de nefrostomía (precargada con un dilatador que se ajusta a la vaina)
- Cinco dilatadores

Tamaño de la vaina (ID/OD X Longitud)	Dilatadores (Fr)	Ref. No.
16/18Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013032
18/20Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013132
20/22Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013232
22/24Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013332
24/26Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013432
26/28Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013532

* 5pcs/caja, 20pcs/ctn



■ Componentes

- ClearPetra Vaina de acceso de nefrostomía (precargada con un dilatador que se ajusta a la vaina)
- Cinco dilatadores
- Alambre guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE, punta en J, 0,035", 90cm

Tamaño de la vaina (ID/OD X Longitud)	Dilatadores (Fr)	Ref. No.
16/18Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013022
18/20Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013122
20/22Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013222
22/24Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013322
24/26Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013422
26/28Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013522

* 5pcs/caja, 20pcs/ctn



■ Componentes

- ClearPetra Vaina de acceso de nefrostomía (precargada con un dilatador que se ajusta a la vaina)
- Cinco dilatadores
- Alambre guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE, punta en J, 0,035", 90cm
- Aguja introductora 18G, con punta de diamante ecogénica

Tamaño de la vaina (ID/OD X Longitud)	Dilatadores (Fr)	Ref. No.
16/18Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013012
18/20Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013112
20/22Fr x 15cm	10, 12, 14, 16, 18	U04A013212
22/24Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013312
24/26Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013412
26/28Fr x 15cm	10, 14, 18, 20, 22	U04A013512

* 5pcs/caja, 20pcs/ctn



● Vaina de cistoscopio ClearPetra

ID/OD x Longitud	Ref. No.	ID/OD x Longitud	Ref. No.
18/20Fr x 21cm	90131821	20/22Fr x 24cm	90132024
18/20Fr x 24cm	90131824	22/24Fr x 21cm	90132221
20/22Fr x 21cm	90132021	22/24Fr x 24cm	90132224

* 1ud/caja, 10ud/ctn

● Botella Stone Collection


Tamaño (ml)	Ref. No.
140ml para vaina 10Fr-22Fr 140ml	79880140
para vaina 24Fr y 26Fr	79880141

* 10pcs/ctn



◆ Vaina de acceso ureteral

La vaina de acceso ureteral se utiliza para el establecimiento de conductos durante procedimientos urológicos endoscópicos.

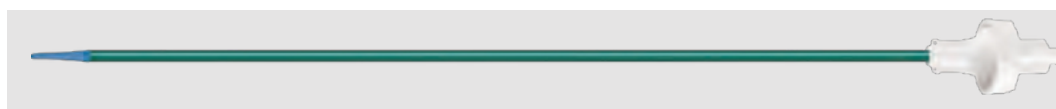

■ Características

- Eje con revestimiento hidrófilo para facilitar el avance
- Punta cónica que facilita la introducción

Tamaño (Fr)	Longitud (cm)	Ref. No.	Tamaño (Fr)	Longitud (cm)	Ref. No.	Tamaño (Fr)	Longitud (cm)	Ref. No.
10	20	U03B011020	12	20	U03B011220	14	20	U03B011420
10	28	U03B011028	12	28	U03B011228	14	28	U03B011428
10	35	U03B011035	12	35	U03B011235	14	35	U03B011435
10	45	U03B011045	12	45	U03B011245	14	45	U03B011445
10	55	U03B011055	12	55	U03B011255	14	55	U03B011455

* 5pcs/caja, 20pcs/ctn



WELL LEAD MEDICAL CO., LTD.

Dirección: 47 Guomao Avenue South, Panyu, Guangzhou, China

Tel: +86-20-84758878 Fax: +86-20-84758224 Código postal: 511434

Oficina de Marketing y Comercio

Añadir RM 805, No 55, 21 Long, Pusan Road, Shanghai, China

Tel: +86-21-58397623 Fax: +86-21-58397615 Código postal: 200125

Correo

electrónico:clearpetra@welllead.com.

cn www.welllead.com

www.clearpetra.com

wl.Endourology.v4.240816